

**Le sourire de
vos patients,
reflète votre
savoir-faire.**

"J'utilise les bagues
céramiques InVu depuis
que j'ai débuté en pratique
privée. Selon mon
expérience, les bagues
InVu sont faciles à poser et
à manipuler, elles ne se
cassent pas pendant le
traitement – et j'obtiens le
couple (torque) et le
contrôle souhaités.

La base en polymère
empêche la céramique
d'adhérer à l'émail,
assurant ainsi un retrait en
toute sécurité."

– Bart Wilson, DMD,
San Antonio, TX




Le Dr Wilson n'est pas consultant pour
TP Orthodontics, Inc. et ne reçoit aucune
rémunération pour ses propos sur le produit

Design Innovant

+ POUR LES PRATICIENS ET LES PATIENTS

Les Bagues Esthétiques InVu représentent la
toute dernière évolution du design des
bagues en céramique — offrant une
esthétique de haut niveau sans allonger les
temps de traitement.

Créées par TP Orthodontics, les innovateurs
de la **Personalized Color-Matching
Technology®**, les bagues InVu constituent
une solution idéale pour tous les patients,
particulièrement pour ceux qui souhaitent un
traitement par gouttières mais ne sont pas
des candidats parfaits. Les praticiens
apprécieront le design éprouvé à double
bague (« twin bracket ») et le processus de
dépose automatique prévisible. Les patients,
quant à eux, apprendront à aimer la surface
lisse, qui ne se tache pas, et le rendu visuel
exceptionnel.

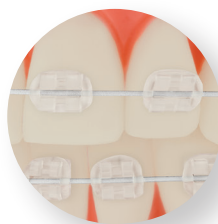

Associées aux arcs
esthétiques TPO®,
les bagues InVu
sont presque
invisibles.

Puisque nos arcs esthétiques ne sont
revêtus que sur la face vestibulaire (labiale),
vous êtes assuré que la taille et les
performances du fil ne sont pas
compromises.

InVu® Confiance en chaque cas.

T P O R T H O . C O M

Ingénierie de Précision

+ POUR UNE PERFORMANCE OPTIMISÉE


TOUT EST DANS LA BASE

L'un des points forts des Bagues Esthétiques InVu est leur base en polymère brevetée. Le design en treillis reproduit fidèlement une base métallique tout en agissant comme une barrière protectrice entre la bague céramique et l'émail. Grâce à la flexibilité de la base au moment de la dépose (debonding), la bague s'enlève proprement, sans risque de cassure et sans outils spécialisés.

Comment Cela Fonctionne

Les propriétés optiques — couleur et translucidité — varient fortement selon les dents des patients. Le matériau céramique haute densité est constitué d'éléments microstructuraux spécialement conçus pour offrir une combinaison parfaite de ces propriétés. Quand la lumière et les couleurs sont diffusées par la bague, celle-ci se fond dans l'émail environnant et devient presque invisible.¹

Grâce à la Personalized Color-Matching Technology, les Bagues Esthétiques InVu s'harmonisent avec pratiquement toute teinte dentaire.

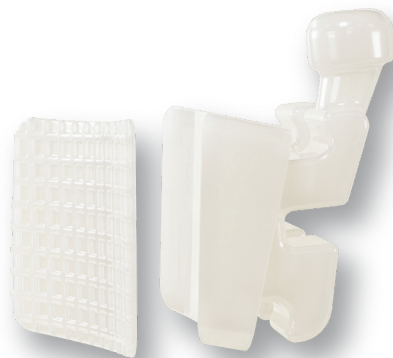

Photos de véritables bagues InVu présentées sans retouche ni coloration améliorée.

FACILITÉ DE DÉPOSE

Le débonding est sûr et confortable pour vos patients. Grâce à la base flexible, les bagues InVu se retirent aisément — aucun instrument spécial requis, simplement des pinces à ligatures standard. Et il n'est pas nécessaire de casser les bagues : laissez le fil ligaturé et procédez comme pour des bagues métalliques.

ESTHÉTIQUE ÉCLATANTE

La base et la bague étant translucides, seule la couleur naturelle de la dent est visible.

ADHÉSION OPTIMALE

La base en polymère flexible assure une fixation chimique et mécanique fiable, éliminant quasiment tout risque de décollement. Et au moment de la dépose, aucune autre bague ne performe comme les InVu.

INTERFACE PROTECTRICE DE L'ÉMAIL

Comme mesure de sécurité, la couche de polymère empêche tout contact entre la céramique et l'émail, garantissant la protection des dents de vos patients lors du débonding.²

APPARENCE VIRTUELLEMENT INVISIBLE

La Personalized Color-Matching Technology permet aux bagues InVu de se fondre dans presque toute teinte dentaire — elles sont pratiquement indétectables sur les photos.

CÉRAMIQUE POLYCRISTALLINE HAUTE DENSITÉ

Ce matériau offre une surface extrêmement lisse et sans défaut, ce qui augmente la résistance à la fracture et le confort du patient.

VÉRITABLE DESIGN TWIN BRACKET

Une conception éprouvée, offrant plusieurs options de ligature et des résultats fiables.

DESIGN OPTIMISÉ DES AILES ET CROCHETS

Des cavités profondes sous les ailes avec débord notable permettent une ligature sûre. Les crochets à embout sphérique sur canines et prémolaires retiennent les élastiques et facilitent la pose pour le patient.

L'Accord Parfait

+ POUR VOS PATIENTS

TP Orthodontics a développé la Personalized Color Matching Technology pour concevoir une bague esthétiquement parfaite, quel que soit le ton de la dent.

Par rapport à 16 autres bagues, celles de la marque TPO dotées de cette technologie sont les seules à offrir une bonne concordance avec la couleur naturelle des dents sur tous les paramètres, et ont été les seules jugées « visuellement imperceptibles ». ¹

Une gamme complète de produits auxiliaires complémentaires est également disponible :


- Arcs esthétiques
- Crochets et stops esthétiques soudables (crimpables)
- Ressorts hélicoïdaux esthétiques (Reflex® coil)
- Ligatures esthétiques



Gagnez du Temps avec l'Adhésif Préappliqué

Les Bagues Esthétiques InVu sont aussi disponibles avec Read-Base®, contenant un adhésif préappliqué eXact® — pour plus de commodité et d'efficacité :

- ❶ Prêtes à l'emploi dès l'ouverture de l'emballage
- ❷ Moindre risque de contamination
- ❸ Pas de glissement des bagues, placement précis garanti
- ❹ Nettoyage minime des résidus d'adhésif

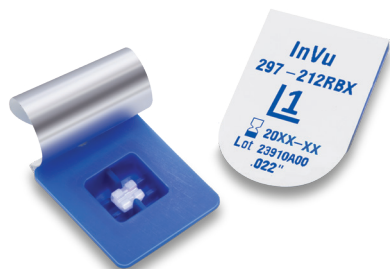

InVu® Confiance en chaque cas.

Un nouveau standard en traitement esthétique

TP Orthodontics est reconnu mondialement comme leader dans les solutions orthodontiques. Une fois de plus, TPO® fournit un produit qui élève la barre des soins en orthodontie.

Les Bagues Esthétiques InVu offrent une ligature contrôlée, une adhésion éprouvée, une dépose sûre et un design confortable. Le design apprécié par les praticiens, allié à l'esthétique plébiscitée par les patients, fait d'InVu la nouvelle référence en traitement esthétique avec bagues.

Élevez le niveau de votre cabinet en contactant
+33 2 59 60 30 53 ou visitez **tportho.com**.

Contactez l'un de nos cabinets pour en savoir plus.

SIÈGE MONDIAL

États-Unis

100 Center Plaza
La Porte, Indiana 46350-9672 USA
Tél. : 800.348.8856
E mail : info@tportho.com

BUREAUX INTERNATIONAUX

Australie

Tél. : 61 +3 9342 3200
Numéro gratuit : 1 800 643 055
E mail : tpaus@tportho.com

Chine

Tél. : +86-510-8516 3367
E mail : tpchina@tportho.com

Angleterre / Europe

Tél. : 44 (0) 113 2203238
E mail : tpeng@tportho.com

Japon

Tél. : 81 3 5961 3800
E mail : tpoj@tportho.com

Mexique / Amérique latine

Tél. : (55) 5662 56 67
Numéro gratuit : 01 800 711 8035
E mail : tpmex@tportho.com

Afrique du Sud

Tél. : +27 (0) 11 100 0956
E mail : tporthosa@tportho.com



TP Orthodontics, Inc.

f **in** **T P O R T H O . C O M**

¹ Lopes-Filho, et al; Influence of optical properties of esthetic brackets (color, translucence, and fluorescence) on visual perception; Am J Orthod Dentofacial Orthop 2012;141:460-7.

² Hüdanur Yılmaz (née Huda Abulkbash) and Selma Elekdag-Türk; Clinical performance of uncoated and precoated polymer mesh base ceramic brackets; Progress in Orthodontics (2019) 2014.

©2026 TP Orthodontics, Inc. All rights reserved.

TPO, Personalized Color-Matching Technology, InVu, Readi-Base, Reflex, and eXact are registered trademarks of TP Orthodontics, Inc. Patents may apply.