

**Das perfekte
Lächeln beginnt
mit der richtigen
Behandlung.**

„Ich arbeite mit InVu-Keramikbrackets, seit ich meine eigene Praxis eröffnet habe. Sie lassen sich präzise platzieren, einfach handhaben und halten zuverlässig – ganz ohne Bruch während der Behandlung.

Besonders überzeugt mich die kontrollierte Kraftübertragung: Ich erreiche den gewünschten Torque und die erwartete Kontrolle. Die spezielle Polymerbasis sorgt zudem dafür, dass die Brackets sich am Ende der Behandlung sicher und schonend vom Zahnschmelz entfernen lassen.“

– Bart Wilson, DMD,
San Antonio, TX




Dr. Wilson ist kein Berater von TP Orthodontics, Inc. und erhält keine finanzielle Vergütung für seine Aussagen zum Produkt.

Innovatives Design

+ FÜR ÄRZTE UND PATIENTEN

InVu Ästhetische Brackets repräsentieren die neueste Entwicklung im Design keramischer Brackets – und heben ästhetische Behandlungen auf ein neues Leistungsniveau, ohne die Behandlungszeit zu verlängern.

Von TP Orthodontics entwickelt – den Erfindern der **Personalized Color-Matching Technology®** – sind InVu Ästhetische Brackets die ideale Lösung für jeden Patienten, insbesondere für diejenigen, die sich Aligner wünschen, aber keine geeigneten Kandidaten dafür sind. Zahnärzte schätzen das bewährte Twin-Bracket-Design und das vorhersehbare Entfernen. Patienten genießen die glatte, verfärbungsresistente Oberfläche und das hervorragende ästhetische Erscheinungsbild.

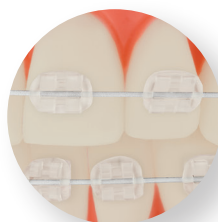

In Kombination
mit TPO®
Ästhetischen
Bögen sind
InVu-Brackets
nahezu
unsichtbar.

Da unsere ästhetischen Bögen nur auf der labialen Oberfläche beschichtet sind, wird die Größe und Funktionalität des Drahtes nicht beeinträchtigt.

InVu® Sicher. Präzise.
Bei jedem Fall.

T P O R T H O . C O M

Präzisions-Design

+ FÜR MAXIMALE LEISTUNG

DAS GEHEIMNIS LIEGT IN DER BASIS


Ein herausragendes Merkmal der InVu Ästhetischen Brackets ist die patentierte Polymerbasis. Die Meshbasis imitiert eine Metallbasis, während das Polymermaterial eine schützende Barriere zwischen Keramikbracket und Zahnschmelz bildet. Durch die Flexibilität der Basis beim Entfernen kann das Bracket sauber gelöst werden – ohne es zu beschädigen und ohne Spezialwerkzeuge.



So Funktioniert Es

Die optischen Eigenschaften von Zähnen – Farbe und Transparenz – variieren stark von Patient zu Patient. Die hochdichte Keramik besteht aus mikrostrukturellen Elementen, die gezielt entwickelt wurden, um genau diese Eigenschaften zu imitieren. Wenn Licht und Farbe durch das Bracket gestreut werden, fügt es sich optisch in den Zahn ein – und wird praktisch unsichtbar.¹

Mit Personalized Color-Matching Technology passen sich InVu Brackets nahezu jeder Zahnfarbe an.

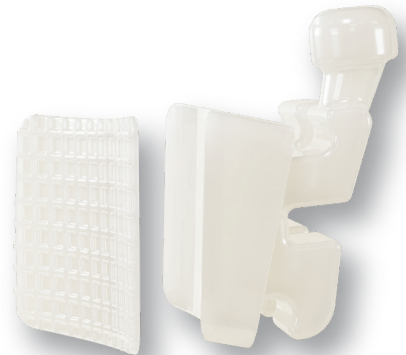

(Abgebildete InVu Brackets ohne Farbfilter oder Retusche.)

EINFACHES ENTFERNEN

Das Entfernen (Debonding) ist für Ihre Patienten sicher und angenehm. Dank der flexiblen Basis lassen sich InVu-Brackets mühelos mit Standard-Ligaturschneidern entfernen – ohne spezielle Instrumente und ohne Brackets zu zerbrechen.

AUSGEZEICHNETE ÄSTHETIK

Da sowohl Basis als auch Bracket transluzent sind, kommt nur die natürliche Zahnfarbe zum Vorschein.

OPTIMALE HAFTFESTIGKEIT

Die flexible Polymerbasis haftet chemisch und mechanisch zuverlässig – Bonding-Fehler werden praktisch ausgeschlossen. Und beim Entfernen liefert kein anderes Bracket vergleichbare Ergebnisse.

ZAHNSCHMELZ-SCH UTZSCHICHT

Die Polymerzwischenlage verhindert direkten Kontakt zwischen Keramik und Zahnschmelz – Ihre Patienten sind beim Entfernen optimal geschützt.²

NAHEZU UNSICHTBARES DESIGN

Dank der Personalized Color-Matching Technology passen sich InVu Brackets nahezu jeder Zahnfarbe an – und sind auf Fotos praktisch unsichtbar.

HOCHDICHTER, POLYKRISTALLINE KERAMIK

Das hochwertige Material sorgt für eine extrem glatte, fehlerfreie Oberfläche – für höhere Bruchfestigkeit und mehr Komfort.

ECHTES TWIN-BRACKET

Ein bewährtes Design mit vielfältigen Ligationsmöglichkeiten und zuverlässigen Ergebnissen.

OPTIMALES DESIGN

Tiefe Unterzüge mit ausgeprägtem Überhang sorgen für sicheren Halt der Ligaturen. Kugelköpfige Haken an Eck- und Prämolaren erleichtern die Befestigung von Gummizügen für den Patienten.

Die perfekte Farbanpassung

+ FÜR IHRE PATIENTEN

TP Orthodontics entwickelte die Personalized Color-Matching Technology um ein Bracket zu schaffen, das auf jeder Zahnfarbe großartig aussieht.

In einem Vergleich mit 16 anderen Brackets war das TPO Bracket mit dieser Technologie das einzige, das in allen Farbaspekten mit natürlicher Zahnfarbe übereinstimmte – und als „visuell nicht wahrnehmbar“ bewertet wurde.¹

Eine vollständige Produktlinie mit passendem Zubehör ist ebenfalls erhältlich:


- Ästhetische Bögen
- Ästhetische Klemmhäkchen und Stops
- Ästhetische Federn
- Ästhetische Ligaturen



Zeit sparen mit voraufgetragenem Kleber

InVu Brackets sind auch mit Readi-Base®, erhältlich – inklusive eXact®-Kleber für maximale Effizienz:

- 1 Sofort einsatzbereit direkt aus der Verpackung
- 2 Geringeres Kontaminationsrisiko
- 3 Kein Verrutschen – präzise Platzierung
- 4 Minimaler Flash – einfach zu beseitigen

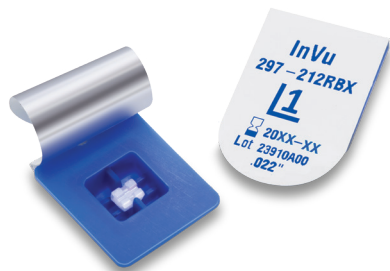

InVu Sicher. Präzise.
Bei jedem Fall.

Ein neuer Standard im der ästhetischen Behandlung

TP Orthodontics ist einer der weltweit führenden Anbieter innovativer Lösungen für die moderne Kieferorthopädie.

Mit InVu Ästhetischen Brackets setzt TPO® einen neuen Maßstab. Das Bracket bietet:

- Kontrollierte Ligation
- Zuverlässige Haftung
- Sicheres Entfernen
- Komfortables Design

Das von Ärzten bevorzugte Design, kombiniert mit der von Patienten geschätzten Ästhetik, macht InVu zum neuen Standard in der ästhetischen Bracketbehandlung.

Heben Sie Ihre Praxis auf ein neues Level – jetzt mehr erfahren:
+49 151 5231 31 89 oder besuchen Sie **tportho.com**.

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr.

WELTWEIT ZENTRALER FIRMENSITZ

United States

100 Center Plaza
La Porte, Indiana 46350-9672 USA
Tel: 800.348.8856
E-Mail: info@tportho.com

INTERNATIONALE NIEDERLASSUNGEN

Australien

Tel: 61 +3 9342 3200
Kostenfrei: 1 800 643 055
E-Mail: tpaus@tportho.com

China

Tel: +86-510-8516 3367
E-Mail: tpchina@tportho.com

England / Europa

Tel: 44 (0) 113 2203238
E-Mail: tpeng@tportho.com

Japan

Tel: 81 3 5961 3800
E-Mail: tpoj@tportho.com

Mexiko / Lateinamerika

Tel: (55) 5662 56 67
Kostenfrei: 01 800 711 8035
E-Mail: tpmex@tportho.com

Südafrika

Tel: +27 (0) 11 100 0956
E-Mail: tporthosa@tportho.com



TP Orthodontics, Inc.

f **in** **T P O R T H O . C O M**

¹ Lopes-Filho, et al; Influence of optical properties of esthetic brackets (color, translucence, and fluorescence) on visual perception; Am J Orthod Dentofacial Orthop 2012;141:460-7.

² Hüdanur Yılmaz (née Huda Abulkbash) and Selma Elekdag-Türk; Clinical performance of uncoated and precoated polymer mesh base ceramic brackets; Progress in Orthodontics (2019) 2014.

©2026 TP Orthodontics, Inc. All rights reserved.

TPO, Personalized Color-Matching Technology, InVu, Readi-Base, Reflex, and eXact are registered trademarks of TP Orthodontics, Inc. Patents may apply.

996-504GRM, Rev. A / 7.26