



**Cuando los
pacientes se
ven bien, tú
también lo estás.**

"He estado utilizando los Brackets de Cerámica InVu® desde que comencé en la práctica privada. En mi experiencia, los brackets InVu® son fáciles de colocar y trabajar; no se rompen durante el tratamiento, y obtengo el torque y control deseados.

La base de polímero evita que la cerámica se adhiera al esmalte, lo que permite un proceso de eliminación seguro."

– Bart Wilson, DMD,
San Antonio, TX




El Dr. Wilson no es consultor de TP Orthodontics, Inc. y no recibe compensación monetaria por sus opiniones sobre el producto presentado.

Diseño Innovador

+ PARA PROFESIONALES Y PACIENTES

Los Brackets Estéticos InVu® representan la evolución más reciente en el diseño de brackets cerámicos — elevando el tratamiento estético a un nuevo nivel de desempeño sin comprometer los tiempos de tratamiento.

Desarrollados por TP Orthodontics, los innovadores de **Personalized Color-Matching Technology®**, los Brackets Estéticos InVu® son una solución ideal para cualquier paciente, especialmente para aquellos que solicitan, pero no son candidatos ideales para tratamiento con alineadores. Los doctores apreciarán el diseño probado de brackets dobles («twin») y el proceso predecible de desmoldeo. Los pacientes valoran la superficie lisa, que no mancha, y la apariencia visual excepcional.

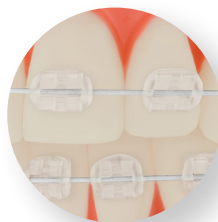

Combinados con los Arcos Estéticos TPO®, los brackets InVu® son casi imperceptibles.

Como nuestros arcos estéticos están recubiertos solo en la superficie labial, puedes estar seguro de que el tamaño y rendimiento del alambre no se verán comprometidos.

InVu® Seguridad en
cualquier situación


T P O R T H O . C O M

Ingeniería de Precisión

+ PARA UN DESEMPEÑO MEJORADO

TODO ESTÁ EN LA BASE


Una característica de diseño que distingue a los Brackets Estéticos InVu® es la base de polímero patentada. El diseño de malla replica de cerca una base metálica, mientras que el material de polímero proporciona una barrera protectora entre el bracket cerámico y el esmalte. Como la base se flexiona durante el descementado, el bracket se quita limpiamente sin necesidad de fracturarlo o depender de herramientas especiales.

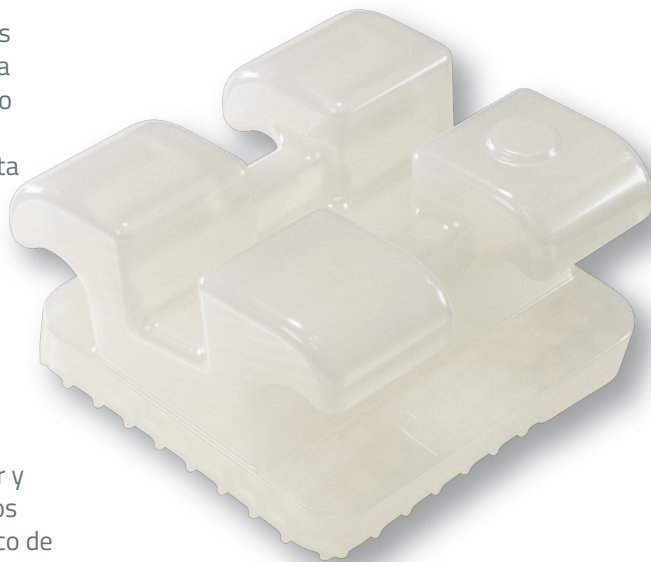

Cómo Funciona

Las propiedades ópticas — incluyendo color y translucidez — varían ampliamente entre los dientes de los pacientes. El material cerámico de alta densidad está compuesto por elementos microestructurales diseñados especialmente para proporcionar una combinación perfecta de estas propiedades ópticas. Cuando la luz y el color se difunden mediante el bracket, este se integra visualmente con el esmalte circundante, haciéndose imperceptible.¹

Con Personalized Color-Matching Technology, los Brackets Estéticos InVu coinciden con prácticamente cualquiera tonalidad dental.

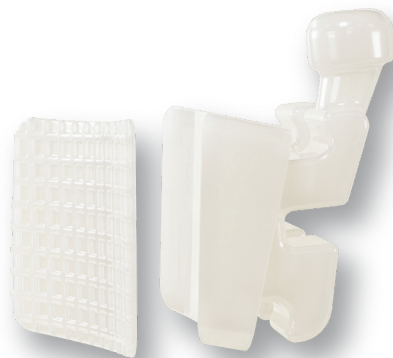

Brackets InVu reales mostrados
sin realce ni edición de color.

FACILIDAD DE DESCIMENTADO

El descementado es seguro y cómodo para tus pacientes. Gracias a la base flexible, los Brackets Estéticos InVu son fáciles de quitar — no se requieren instrumentos especiales, solo cortadores de ligaduras estándar. Y no hace falta fracturar los brackets para retirarlos; simplemente deja el alambre sujeto y procede como lo harías con brackets metálicos.

ESTÉTICA EXCEPCIONAL

Dado que tanto la base como el bracket son translúcidos, solo se percibe el color natural del diente.

RESISTENCIA DE UNION ÓPTIMA

La base flexible de polímero se adhiere de forma segura, tanto química como mecánicamente, eliminando virtualmente fallos de adhesión. Y cuando es hora de desmolde, ningún otro bracket funciona como los InVu.

INTERFAZ DE PROTECCIÓN DEL ESMALTE

Como medida de seguridad, la capa de polímero evita el contacto del esmalte con la cerámica, asegurando la protección de los dientes de tus pacientes durante el desmolde.²

APARIENCIA VIRTUALMENTE INVISIBLE

Personalized Color-Matching Technology permite que los Brackets Estéticos InVu se integren con casi cualquier color dental — y son prácticamente indetectables en fotografías.

CERÁMICA POLICRISTALINA DE ALTA DENSIDAD

El material de alta densidad proporciona una superficie extremadamente lisa, sin imperfecciones, lo que resulta en una mayor resistencia a la fractura y mayor confort para el paciente.

BRACKET DOBLE (TRUE TWIN)

Diseño probado que ofrece múltiples opciones de ligadura y resultados predecibles.

DISEÑO ÓPTIMO DE HOOK Y GANCHO

Cavidades profundas debajo del ala con saliente considerable permiten una ligadura segura. Ganchos reales de extremo esférico en caninos y premolares retienen los elásticos y facilitan su colocación por parte del paciente.

El Emparejamiento Perfecto

+ PARA TUS PACIENTES

TP Orthodontics desarrolló Personalized Color-Matching Technology, para crear un bracket realmente estético que se ve bien en cualquier tono dental.

Al compararlo con otros 16 brackets diferentes, el bracket TPO con esta tecnología fue la única marca que mostró una buena concordancia con el color de los dientes naturales en todos los parámetros cromáticos. También fue la única marca calificada como "visualmente imperceptible".¹

También está disponible una línea completa de productos auxiliares complementarios:


- Arcos estéticos
- Hooks y stops estéticos que se engarzan (crimpables)
- Resortes en espiral Reflex® estéticos
- Ligaduras estéticas



Ahorra Tiempo con Adhesivo Preaplicado

Los Brackets Estéticos InVu también están disponibles con Read-Base®, que cuenta con adhesivo preaplicado eXact®, para mayor comodidad y eficiencia:

- 1 Listos para colocar nada más sacarlos del empaque
- 2 Menor riesgo de contaminación
- 3 Los brackets se fijan fácilmente sin deslizarse
- 4 Limpieza mínima del excedente de adhesivo

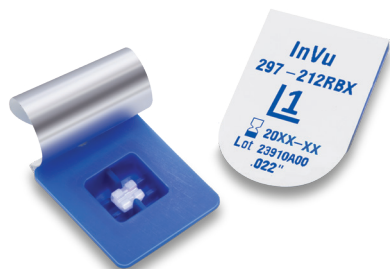

InVu® Seguridad en cualquier situación

Un nuevo estándar en tratamiento estético

TP Orthodontics es líder reconocido mundialmente en ofrecer soluciones valiosas para ortodoncistas. Una vez más, TPO® presenta un producto que eleva el estándar en el tratamiento ortodóntico.

Los Brackets Estéticos InVu ofrecen ligadura controlada, resistencia de adhesión probada, desmoldeo seguro y diseño cómodo. El diseño preferido por los doctores, junto con la estética valorada por los pacientes, convierte a InVu® en el nuevo estándar en tratamiento de brackets estéticos.

Eleva tu consulta poniéndote en contacto en **936 41 54 81** o visitando **tportho.com**.

Ponte en contacto con una de nuestras oficinas para obtener más información.

SEDE MUNDIAL

Estados Unidos
100 Center Plaza
La Porte, Indiana 46350-9672 USA
Tel: 800.348.8856
Correo electrónico: info@tportho.com

INTERNATIONAL OFFICES

Australia
Tel: 61 +3 9342 3200
Línea gratuita: 1 800 643 055
Correo electrónico: tpaus@tportho.com

China
Tel: +86-510-8516 3367
Correo electrónico: tpchina@tportho.com

Reino Unido / Europa
Tel: 44 (0) 113 2203238
Correo electrónico: tpeng@tportho.com

Japón
Tel: 81 3 5961 3800
Correo electrónico: tpoj@tportho.com

México / América Latina
Tel: (55) 5662 56 67
Línea gratuita: 01 800 711 8035
Correo electrónico: tpmex@tportho.com

Sudáfrica
Tel: +27 (0) 11 100 0956
Correo electrónico: tporthosa@tportho.com



TP Orthodontics, Inc.

f **in** **T P O R T H O . C O M**

¹ Lopes-Filho, et al; Influence of optical properties of esthetic brackets (color, translucence, and fluorescence) on visual perception; Am J Orthod Dentofacial Orthop 2012;141:460-7.

² Hüdanur Yilmaz (née Huda Abulkbash) and Selma Elekdag-Türk; Clinical performance of uncoated and precoated polymer mesh base ceramic brackets; Progress in Orthodontics (2019) 2014.

©2026 TP Orthodontics, Inc. All rights reserved.

TPO, Personalized Color-Matching Technology, InVu, Readi-Base, Reflex, and eXact are registered trademarks of TP Orthodontics, Inc. Patents may apply.